

Reflex XL & Reflex XXL douche-toiletstoel

Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 227 kg (Reflex XL); 275 kg (Reflex XXL).
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.



02. Bedieningspaneel



Voorwaarts kantelen Achterwaarts kantelen




Nooddaalknop Statusmelding




03. Armsteun

1. Ontgrendelen
2. Druk op de blauwe knop
3. Naar boven wegdraaien

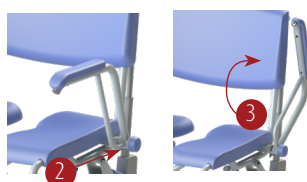

5100 5900
Reflex XXL

5100 5950
Reflex XL

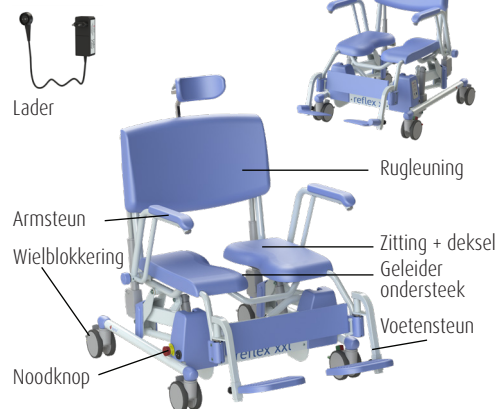

04. Gebruik

1. Haal de Reflex XL/Reflex XXL indien nodig van de lader.
2. Breng de stoel in de juiste positie en klap indien nodig de voetensteunen omhoog of haal de voetensteunen los van de Reflex XL/Reflex XXL.
3. Zet de stoel op de rem!
4. De cliënt kan plaatsnemen in de stoel. Ondersteun de cliënt waar nodig. Indien gewenst kan de stoel 10 graden voorover gekanteld worden, om instappen te vergemakkelijken.
5. Zet beide voeten op de voetensteunen en kuitten tegen de kuitband.


05. Voetensteun

Beide voetensteunen dienen weg gedraaid te zijn als de cliënt op de stoel gaat zitten. Zorg ervoor dat de cliënt met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

De voetensteunen van de Reflex XL/XXL zijn in de hoogte en de voeten van de Reflex XXL is in breedte verstelbaar.

06. Opladen accu

Sluit de Reflex XL/XXL na gebruik aan op de lader, voor het behoud van de accu's.

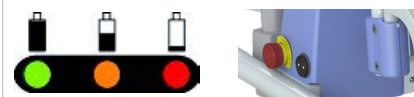

Uit
Groen
Oranje
Rood

Slaapstand
Stoel bedrijfsklaar
Aan het laden
Accu is leeg


Tijdens het laden werkt de Reflex XL/XXL niet.

07. Toiletfunctie

- Verwijder voordat de cliënt plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* De Reflex XL/XXL kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Reflex XL/XXL kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.


08. Nooddaal & daalknop

1. Activeer de noodstop bij een noodgeval waarbij direct de stijgende of dalende beweging gestopt moet worden.
2. Wanneer de daalknop wordt geactiveerd bij een noodsituatie, zakt de stoel naar de laagste positie.

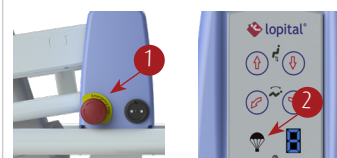

09. Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.
3. Richtingsvaststelling.

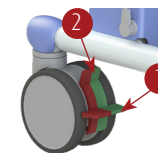

10. Reiniging en onderhoud

De Reflex XL/XXL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Reflex XL/XXL volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl

