



Onderhoudsprotocol

**Tango XL & Tango XXL
douche-toiletstoel**



Tango XL douche-toiletstoel: 5100 5750



Tango XXL douche-toiletstoel: 5100 5850

Belangrijk:

De Tango XL / Tango XXL dient minimaal 1 keer per jaar periodiek onderhouden en geïnspecteerd te worden.

Service en onderhoud aan de Tango XL / Tango XXL is alleen toegestaan door daartoe door Lopital gekwalificeerde personen en met originele reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Tango XL / Tango XXL aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorzieningen van Lopital. De Tango XL / Tango XXL voldoet hierdoor niet meer aan de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen.

Elke inspectie of reparatie dient te worden genoteerd in het logboek.

De gemiddelde technische levensduur van de Tango XL / Tango XXL is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Zorg ervoor dat alle schroeven, bouten en moeren worden gecontroleerd en indien nodig worden vastgedraaid.

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.

Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk

T +31 (0)13 5239300

www.lopital.com, info@lopital.nl

MAIN5850-2026-01_NL

Inhoudsopgave

1.	Algehele staat van de stoel	4
2.	Wielen.....	5
3.	Armsteunen	6
4.	Voetsteun	7

1. Algehele staat van de stoel
2. Wielen
3. Armsteunen
4. Voetsteun

C = Controleren

S = Smeren

A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen)

V = Vervangen (of delen vervangen)

R = Reinigen



Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUR	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A
Wielen	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Armsteunen	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Voetsteun	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

1. Algehele staat van de stoel

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A

Benodigd gereedschap
– Lakstift Sikkens A77A2

- Controleer of alle stickers nog aanwezig en leesbaar zijn.
- Serienummersticker:
 - Is het serienummer nog leesbaar?
 - Is de datamatrix nog leesbaar voor een scanner?
 - Is het CE-logo nog zichtbaar?
- Keuringssticker:
 - Is de keuringsdatum nog leesbaar?
- QR sticker:
 - Is de QR-code nog leesbaar voor een QR scanner?
- Controleer alle gelakte onderdelen visueel op beschadigingen en roestvorming. Indien nodig bijlakken.
- Controleer de PUR onderdelen op ernstige verkleuring (vooral bruin) en op beschadigingen.
- Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten. Ook van de geleider!



Figuur 1 Stickers



Het is sterk aan te bevelen om elke 5 jaar de zitting en rug te vervangen, in verband met de hygiëne.


Aanwezig (demonteerbaar zonder gereedschap):

- 2 zithelften
- Voetsteun (geen afkeerpunt)
- Kuitband
- Rug Tango XXL

2. Wielen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap
- Inbussleutel 8 mm

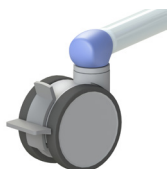


Figuur 2 Wiel Tango XXL



Figuur 3 Wiel exploded view Tango XXL



Figuur 4 Wiel Tango XL

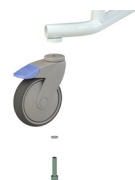

Figuur 5 Wiel exploded view Tango XL

- Controleer de bevestiging van het wiel (speling).
- Controleer de werking van vrijloop + remmen.
- Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. Zo niet, controleer de stoel op rechtloop.
- Controleer of het remlijpje intact is.
- Controleer het loopvlak.



Indien er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, vervang het wiel.

3. Armsteunen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd
gereedschap
– Inbussleutel 4 mm

- Controleer de werking van de armsteunen.
- Controleer de armsteunen op beschadigingen, roestvorming en speling.
- Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten.
- Controleer de breedte verstelling van de armsteunen bij de Tango XXL.

Kijk voor een exploded view op www.lopital.nl



Figuur 6 Armsteun Tango XL




Figuur 7 Armsteun Tango XXL

4. Voetsteun

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap
- Inbussleutel 4 mm

- Controleer de voetsteun op beschadigingen.
- Alleen Tango XL: Klap de voetplaten op (Ze behoren in opgeklapte stand te blijven staan, zonder automatisch terug te vallen).
- Alleen bij Tango XXL: Controleer de breedte verstelling (wegdraaien) van de voetsteun.
- Controleer of de voetplaten gelijk staan en iets schuin omhoog naar het midden. Zo niet, controleer ook het frame.
- Controleer of de voetsteun goed vast zit op verschillende hoogten. Diverse hoogte instellingen proberen.
- Is de trekknop aanwezig?
- Alleen Tango XL: Is de voetplaatdop aanwezig?

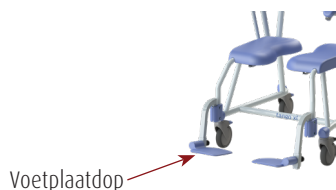

Figuur 8 Voetsteunen Tango XL



Figuur 9 Voetsteunen Tango XXL

Voor vragen over het onderhoudsprotocol raadpleeg Lopital (telefoon +31 (0)13 5239300 of mail info@lopital.nl). U dient het serienummer (rood omrand) door te geven aan Lopital. Zie hiervoor de serienummersticker op het product.



lopital®
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
The Netherlands
T: (031)13-5239300

IPX-
Weight: -- kg
Type battery: ---
Drives operates: -- V
Charge: ---V--- mA
Non continuous: -----

MD

REF

SN

MAX LOAD

--- KG/---LBS

CE

Revision -



(01)-----
(11)-----
(21)-----



Als de zorg mag kiezen



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56,
5060 AB Oisterwijk, Tel +31 (0)13.52.39.300, E-mail info@lopital.nl,
www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België B.V., Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.



Green Deal



**MADE IN
THE NETHERLANDS**



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001



**Scan for
information**