



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Reiniging en desinfectie protocol

Douche- & Toiletstoelen
Douchebrancards
Aankleedtafels
Actieve Opsta-hulp

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital-producten	4
Aanbevelingen voor reiniging en desinfectie	6
Instructies per product	7
Nemo douche-toiletstoel	7
Flexo douche-toiletstoel	9
Elexo XXL douche-toiletstoel	11
Reflex douche-toiletstoel	13
Reflex XL & Reflex XXL douche-toiletstoel	15
Tango douche-toiletstoel	17
Mylo douche-toiletstoel	19
Tango XL douche-toiletstoel	21
Tango XXL douche-toiletstoel	23
Timo douche-toiletstoel	25
Cleo douche-toiletstoel	27
Marina Basic & Marina Deluxe – douchebrancard	29
Marina douchebrancard	31
Sirocco muurbevestiging douchebrancard	33
Sirocco Basic / Sirocco Deluxe muurbevestiging douchebrancard	33
Amfora muurbevestiging douchebrancard	33
Vienna muurbevestiging douchebrancard	33
Stylex douchebrancard	35
Amfora douchebrancard	35
Vienna aankleedtafels	35
Luxal douchebrancard	37
Lotus actieve opstahulp	39
Lotus / Lotus Compact / Lotus XL – actieve opstahulp	41

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.

Laarakkerweg 9

5061 JR Oisterwijk

The Netherlands

T +31 (0) 13 5239300

www.lopital.nl / www.lopital.com

info@lopital.nl

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten Klasse 1 (MDR (EU) 2017/745).

Inleiding

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor alle Lopital douche-toiletstoelen, douchebrancards, aankleedtafels en opstahulpen.

Reiniging en desinfectie van Lopital producten is nodig om te voorkomen dat besmettingsbronnen die op het product achterblijven, worden overgedragen. Producten moeten daarom na gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Om de garantie en de verwachte levensduur te behouden, is het belangrijk om de aanbevelingen in dit protocol op te volgen. Dit protocol beschrijft gedetailleerde reinigings- en desinfectieprocedures voor Lopital producten. De instructies in dit protocol vervangen niet het reinigings- en desinfectiebeleid van uw instelling.

Dit protocol is alleen bedoeld voor personen Lopital producten gebruiken of zorg dragen voor reiniging, desinfectie en onderhoud van de producten. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstige schade aan de producten en/of onzichtbare defecten.

Lopital raadt aan om de producten voor het eerste gebruik te reinigen en te desinfecteren.

Lopital adviseert de producten te reinigen en te desinfecteren als ze als afval worden afgevoerd. Alle vervangen of gedemonteerde onderdelen kunnen worden teruggestuurd naar Lopital. Het is ook mogelijk om deze onderdelen ter vernietiging aan te bieden aan de technicus. Wij zorgen ervoor dat alle onderdelen op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

De producten van Lopital worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Lopital biedt alleen uitdrukkelijke schriftelijke garantie op de verkoop van producten.

Informatie in dit protocol kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek onze website voor de meest actuele versie van dit protocol of neem contact op met uw Lopital accountmanager voor advies en meer informatie.

Veiligheidsadvies

- Draag tijdens het schoonmaken geschikte beschermingsmiddelen volgens de instructies van de fabrikant en de protocollen van uw instelling, zoals: rubberen handschoenen, veiligheidsbril, schort, gezichtsmasker en schoenbescherming.
- Haal, indien van toepassing, de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt en desinfecteert.
- Reinig elektrische en hydraulische producten nooit door water op te gieten.
- Gebruik nooit een stoomreiniger om schoon te maken.
- Lees de aanbevelingen van de fabrikant voor het reinigen en desinfecteren van de producten.



Onvoldoende reiniging en desinfectie verhoogt het risico op kruisbesmetting!

Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital-producten

Chemische klasse	Actief bestanddeel	pH
Quaternaire ammoniumchloride	Didecyl-dimethylammoniumchloride= 8,704% Alkyldimethylbenzylammoniumchloride = 8,19%	9.0-10.0 tijdens gebruik
Quaternaire ammoniumchloride	Alkydimethylbenzylammoniumchloride= 13,238% Alkydimethylbenzylammoniumchloride= 13,238%	9.5 tijdens gebruik
Geaccelereerd waterstofperoxide	Waterstofperoxide 0,1-1,5% Benzylalcohol: 1-5% Waterstofperoxide 0,1-1,5% Benzylalcohol: 1-5%	3
Fenolisch	Orthofenylfenol= 3,40% Orthobenzylparachloorfenol = 3,03	3.1 +/- 0.4 tijdens gebruik
Chloor	Natriumhypochloriet max. 1000 ppm	12.2
Alcohol	Isopropylalcohol = 70%	5.0-7.0
Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloriden	Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloriden (22%) 2-fenoxyethanol (20%) Tridecyl polyethyleenglycolether (15%) Propaan-2-ol (8%)	ongeveer 8.6 tijdens gebruik
Organisch peroxide (type E, vast stof)	Magnesiummonoperoxifalaat-hexahydraat (50-100%) Anionogene oppervlakteactieve stof 5-10%) Niet-ionogene oppervlakteactieve stof (1-10%)	5.3 tijdens gebruik
Ethanol	Waterstofperoxide (2,5-10%) Lauryldimethylamine oxide (0-2,5%) Ethanol (2,5-10%)	7
Trocloseenatrium	Adipinezuur 10-30% Amorf silicium< 1% Natriumtoluenesulfonaat 5-10% Trocloseenatrium 10-30%	4-6 tijdens gebruik

	Reinigingsmiddelen/ ontsmettingsmiddelen	Fabrikant	Mag niet worden gebruikt op het volgende onderdeel:
	Virex II (256)	Johnson/Diversey	Harde plastic onderdelen van alle Lopital producten, inclusief voetplaten, Lotus zittingen, ligplaten van douchebrancards, afdekkingen, pedalen.
	HB Quat 25L	3M	
	Oxivie Tb	Johnson/Diversey	Kuitriemen van douche (-toilet) stoelen.
	Wexcide	Wexford Labs	
	Dispatch	Caltech	Kuitriemen van douche (-toilet) stoelen.
	Viraguard	Veridien	Handbediening van alle producten indien van toepassing
	Terralin Protect	Shülke	Harde plastic onderdelen van alle Lopital producten, inclusief voetplaten, Lotus zittingen, ligplaten van douchebrancards, afdekkingen, pedalen.
	Dismozone plus	Bode	Kuitriemen van douche (-toilet) stoelen.
	Anioxy Spray WS	Anios	Controlbox van de Luxal, Marina, Sirocco, Amfora, Vienna
	Chlor-Clean	Guest Medical Ltd	Kuitriemen van douche (-toilet) stoelen.

Aanbevelingen voor reiniging en desinfectie

Om het risico op besmetting te vermijden, moeten alle onderdelen na gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd. Alle nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om alle vlekken en vuil te verwijderen.

De reinigings- en desinfectiemethode die op de volgende pagina's wordt beschreven, is specifiek van toepassing op Lopital producten en accessoires. Deze methode is ontworpen om tijd te besparen en infecties efficiënter te voorkomen.

Uitrusting:

- Draag bij het schoonmaken de juiste beschermende uitrusting (zoals rubberen handschoenen, veiligheidsbril, schort, gezichtsmasker en schoenbescherming) volgens de instructies van de fabrikant en de protocollen van uw instelling.
- Schone emmers
- Poetsdoeken voor schoonmaken en drogen
- Zachte borstel
- Warm water
- Volg de instructies in "Algemene reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital-producten" op pagina 4/5 van dit document om reinigings-/desinfectiemiddelen te vinden die al dan niet compatibel zijn met Lopital-producten.

Nemo douche-toiletstoel

51005100

De Nemo moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Onderdelen van PUR-integraalschuim met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR-onderdelen worden gedesinfecteerd met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Nemo mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Nemo aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen, de hoofdsteen en het vulstuk van de stoel.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jaarlijks 	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek. Om gemakkelijk bij alle delen van de stoel te kunnen komen, zet je de stoel zowel rechtop als achterover.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant)
 - Stoelbekleding
 - Hoofdsteun
 - Ondersteuning voor de kuit
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen voor Lopital-producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Flexo douche-toiletstoel

51005199

De Flexo moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimonderdelen met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve reinigingsmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR-componenten ontsmet worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Flexo mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Flexo aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen, de hoofdsteun en het vulstuk van de zitting.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jaarlijks 	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

1. Haal, indien van toepassing, de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt en desinfecteert.

Schoonmaken

2. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
3. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek. Om gemakkelijk bij alle delen van de stoel te kunnen komen, zet je de stoel zowel rechtop als achterover.
4. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant)
 - Stoelbekleding
 - Ondersteuning de kuit
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigungsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

5. Herhaal het reinigungsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigungs-/desinfectiemiddelen voor Lopital-producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
6. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn zeer geschikt voor de juiste reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelers/desinfectoren zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen, zodat niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel beschermd wordt. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Elexo XXL douche-toiletstoel

51005300

De Elexo XXL moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimonderdelen met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR onderdelen gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Elexo XXL alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Elexo XXL aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen, het vulstuk van de stoel en de handbediening.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jaarlijks	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. For more information about the maintenance contract, please contact Lopital (info@lopital.nl) or speak to your supplier.



Schoonmaakprotocol

1. Haal, indien van toepassing, de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt en desinfecteert.

Schoonmaken

2. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
3. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek. Om gemakkelijk bij alle delen van de stoel te kunnen komen, zet je de stoel zowel rechtop als achterover.
4. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Ruggleuning
 - Zitting (ook onderkant)
 - Ondersteuning voor de kuit
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

5. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen voor Lopital-producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
6. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Reflex douche-toiletstoel

51005600, 51005605

De Reflex moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Onderdelen van PUR-integraalschuim met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR-onderdelen worden gedesinfecteerd met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Reflex mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Reflex aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen, het vulstuk van de stoel en de handbediening.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt. • Laad de batterij minstens één keer per week op.
Jaarlijks	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.



Schoonmaakprotocol

1. Haal, indien van toepassing, de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt en desinfecteert.

Schoonmaken

2. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
3. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druiptnatte doek. Om gemakkelijk bij alle delen van de stoel te kunnen komen, zet je de stoel zowel rechtop als achterover.
4. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Ruggleuning
 - Zitting (ook onderkant)
 - Stoelbekleding
 - Hoofdsteen
 - Ondersteuning voor de kuit
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Handmatige bediening (optie) of bedieningspaneel op de achterkap
 - Aan/uit-schakelaar
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

5. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Loptal producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
6. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Reflex XL & Reflex XXL douche-toiletstoel

51005900, 51005950

De Reflex XL & Reflex XXL moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Onderdelen van PUR-integraalschuim met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR-onderdelen worden gedesinfecteerd met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Reflex XL/ Reflex XXL mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Reflex XL/Reflex XXL aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen, het vulstuk van de stoel en de handbediening.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt. • Laad de batterij minstens één keer per week op.
Jaarlijks	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.



Schoonmaakprotocol

1. Haal, indien van toepassing, de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt en desinfecteert.

Schoonmaken

2. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
3. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druiptnatte doek. Om gemakkelijk bij alle delen van de stoel te kunnen komen, zet je de stoel zowel rechtop als achterover.
4. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant, de zitting is afneembaar)
 - Stoelbekleding
 - Hoofdsteun
 - Ondersteuning voor de kuit
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Handmatige bediening (optie) of bedieningspaneel op de achterkap
 - Aan/uit-schakelaar
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

5. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Loptal producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
6. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Tango douche-toiletstoel

51005700

De Tango moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimonderdelen met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR onderdelen gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Tango mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Tango aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen, de hoofdsteun en het vulstuk van de stoel.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jaarlijks	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.



Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant)
 - Stoelbekleding
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigungsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Mylo douche-toiletstoel

51005701

De Mylo moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimonderdelen met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR-onderdelen worden gedesinfecteerd met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Mylo mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Mylo aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen en de afneembare zitting.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jaarlijks 	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant, de zitting is gemakkelijk opklapbaar en afneembaar)
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen..

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Tango XL douche-toiletstoel

51005705, 51005750

De Tango XL moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimonderdelen met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR onderdelen gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Tango XL mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Tango XL aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jarlijks 	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant, de zitting is afneembaar)
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn zeer geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Tango XXL douche-toiletstoel

51005800, 51005850

De Tango XXL moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimonderdelen met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR onderdelen gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Tango XXL alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Tango XXL aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jaarlijks 	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant, de zitting is afneembaar)
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Timo douche-toiletstoel

54006020, 54006021, 54006024, 54006030, 54006034, 54006035

De Timo moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimcomponenten met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve reinigingsmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR onderdelen gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Timo mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Tango XXL aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen en afneembare zitting.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jaarlijks 	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant, de zitting is afneembaar)
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Cleo douche-toiletstoel

54006040, 54006050

De Cleo moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimcomponenten met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR onderdelen gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal. Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische delen van de PUR-componenten gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Cleo mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.


Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de stoel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zie volgende pagina). • Onderdelen van PUR-schuim moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. • Controleer of alle onderdelen van de Cleo aanwezig zijn, inclusief de voetsteunen en afneembare zitting.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de stoel nog goed werkt.
Jaarlijks	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.



Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de zitting met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Je kunt een zachte borstel gebruiken om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele stoel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Rugleuning
 - Zitting (ook onderkant, se zitting afineembaar)
 - Voetsteunen
 - Armleuningen
 - Handgrepen
 - Bedpan gidsen
 - Wielen

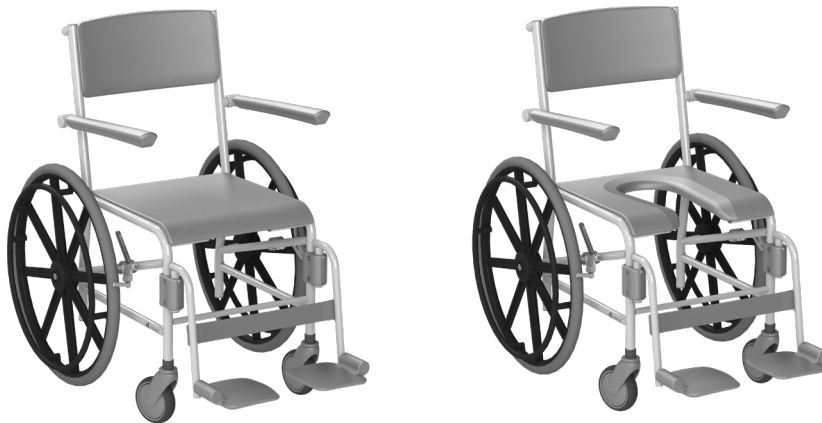

Je kunt ook een reinigungsunit/reinigingssysteem gebruiken om je stoel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de stoel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

De ondersteek moet na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden in een ondersteekwasmachine.

De bedpanspoelers/desinfectoren zijn uitermate geschikt voor een goede reiniging en desinfectie van de bedpan. Bedpanspoelmachines/desinfectiemachines zijn ontwikkeld om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen en zo niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel te beschermen. Naast reiniging voeren de machines bijvoorbeeld een thermische desinfectie uit in overeenstemming met de huidige richtlijnen en aanbevelingen. Dit garandeert de hoogste hygiënenormen.

Marina Basic & Marina Deluxe – douchebrancards

61002000, 61002010, 61002050, 61002060

De Marina Basic / Marina Deluxe moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kan de matras gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

Voor de beste en meest efficiënte reiniging van de matras en de bedbodem kan de matras opgetild en verwijderd worden. Droog de plaat waarop de matras ligt.

Controleer de wielen regelmatig op haren en stof en verwijder ze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Marina Basic / Marina Deluxe mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Reinig de trolley met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. • Reinig en desinfecteer de matras. • Controleer of alle onderdelen van de Marina Basic / Marina Deluxe aanwezig zijn.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de trolley nog correct werkt. • Laad de batterij minstens één keer per week op.
Jaarlijks 	• Volgens de medische hulpmiddelenverordening MDR (EU) 2017/745 moet de Marina Basic / Marina Deluxe worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de optie om de trolley eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de trolley met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Een zachte borstel kan worden gebruikt om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele trolley van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek. Voor gemakkelijke toegang tot alle onderdeel en van de trolley, zet je de trolley in de hoogste en laagste stand.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Matras
 - Brancard
 - Zijhekken
 - Hoofd- en voeteneinde
 - Handmatige bediening (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Voetpedaal (met hydraulisch aangedreven trolley)
 - Rempedalen
 - Aan/uit-schakelaar (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Nooddaalknop en noodstop (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Hendel Anti-trendelenburgstand
 - Hefboom voor rugverstelling (met hydraulisch aangedreven trolley)
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je trolley te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de trolley na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

Marina douchebrancard

61002300, 61002305, 61002310, 61002320, 61002330, 61002345,
61002350, 6100235, 61002360, 61002370, 61002380, 61002385

De Marina moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kan de matras worden gedesinfecteerd met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

Voor de beste en meest efficiënte reiniging van de matras en de bedbodem kan de matras opgetild en verwijderd worden. Droog de plaat waarop de matras ligt.

Controleer de wielen regelmatig op haren en stof en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Marina mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Reinig de trolley met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. • Reinig en desinfecteer de matras. • Controleer of alle onderdelen van de Marina aanwezig zijn.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de trolley nog correct werkt. • Laad de batterij minstens één keer per week op.
Jaarlijks 	• Volgens de verordening betreffende medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet de Marina worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de trolley eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

1. Haal, indien van toepassing, de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt en desinfecteert.

Schoonmaken

2. Reinig de trolley met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Een zachte borstel kan worden gebruikt om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
3. Veeg de hele trolley van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek. Voor gemakkelijke toegang tot alle onderdelen van de trolley, zet je de trolley in de hoogste en laagste stand.
4. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken::
 - Matras
 - Kussen
 - Brancard
 - Zijhekken
 - Hoofd- en voeteneinde
 - Handmatige bediening (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Voetpedaal (met hydraulisch aangedreven trolley)
 - Rempedalen
 - Aan/uit-schakelaar (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Nooddaalknop en noodstop (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Hendel Anti-trendelenburgstand
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je trolley te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

5. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
6. Veeg de trolley na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

Sirocco muurbevestiging douchebrancard

61002400, 61002401

Sirocco Basic / Sirocco Deluxe muurbevestiging douchebrancard

61002500, 61002505, 61002510

Amfora muurbevestiging douchebrancard

62005005, 62005010

Vienna muurbevestiging douchebrancard

65005015, 65005020, 65005030

De trolley/kaptafel moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kan de matras gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

Voor de beste en meest efficiënte reiniging van de matras en de bedbodem kan de matras opgetild worden. Droog de plaat waarop de matras ligt.

Onderhoud en reparaties aan de wagen/kaptafel mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.



Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Reinig de trolley/stretchers/aankleedtafel met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. • Reinig en desinfecteer de matras. • Controleer of alle onderdelen van de trolley/stretchers/kaptafel aanwezig zijn.
Wekelijks	• Controleer of de trolley/stretchers/kaptafel nog goed werkt. • Laad de batterij minstens één keer per week op.
Jaarlijks	• Volgens de medische hulpmiddelenverordening MDR (EU) 2017/745 moet de trolley/stretchers kaptafel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de optie om de trolley/stretchers/kaptafel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.



Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de trolley/kaptafel met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik een zachte borstel om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele trolley/kaptafel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek. Om gemakkelijk bij alle onderdelen van de trolley te kunnen komen, zet je de trolley in de hoogste en laagste stand.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Matras
 - Kussen (Sirocco)
 - Brancard
 - Zijhekken
 - Hoofd- en voeteneinde
 - Handmatige bediening
 - Besturingskast

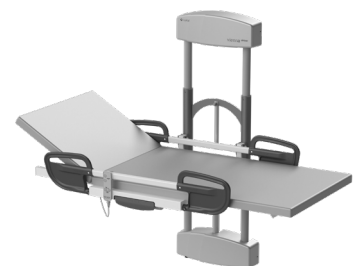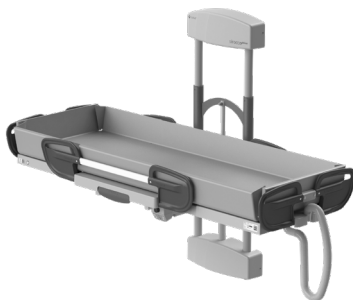

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de trolley/kaptafel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

Stylex douchebrancard

61003070

Amfora douchebrancard

62004010, 62004045, 62004011, 62004016

Vienna aankleedtafel

65004021, 65004026, 65004020, 65004025

De trolley/kaptafel moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kan de matras gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

Controleer de wielen regelmatig op haren en stof en verwijder ze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de trolley/kaptafel mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Reinig de trolley/aankleedtafel met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. • Reinig en desinfecteer de matras. • Controleer of alle onderdelen van de trolley/kaptafel aanwezig zijn.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de trolley/kaptafel nog steeds goed werkt. • Laad de batterij minstens één keer per week op.
Jaarlijks 	• Volgens de medische hulpmiddelenverordening MDR (EU) 2017/745 moet de trolley kaptafel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

1. Haal, indien van toepassing, de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt en desinfecteert.

Schoonmaken

2. Reinig de trolley/kaptafel met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik een zachte borstel om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
3. Veeg de hele trolley/kaptafel van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druiptnatte doek. Voor gemakkelijke toegang tot alle onderdelen van de trolley/kaptafel, zet je de trolley/kaptafel in de hoogste en laagste stand
4. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Trolley oppervlak
 - Zijhekken
 - Handmatige bediening (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Voetpedaal (met hydraulisch aangedreven trolley)
 - Rempedalen
 - Aan/uit-schakelaar (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Nooddaalknop en noodstop (met elektrisch aangedreven trolley)
 - Knop voor rugverstelling (met hydraulisch aangedreven trolley)
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je trolley/kaptafel te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

5. Herhaal het reinigingsprotocol - Reinigen na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital-producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
6. Veeg de trolley/kaptafel na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om alle resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

Luxal douchebrancard

61002200, 61002216

De Luxal moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kan de matras gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

Voor de beste en meest efficiënte reiniging van de matras en de bedbodem kan de matras opgetild worden. Droog de plaat waarop de matras ligt.

Controleer de wielen regelmatig op haren en stof en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Luxal mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de trolleytafel schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. • Reinig en desinfecteer de matras. • Controleer of alle onderdelen van de Luxal tafel aanwezig zijn.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de trolley/kaptafel nog steeds goed werkt. • Laad de batterij minstens één keer per week op.
Jaarlijks 	• Volgens de medische hulpmiddelenverordening MDR (EU) 2017/745 moet de trolley/kaptafel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de trolley met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Een zachte borstel kan worden gebruikt om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele trolley van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek. Voor gemakkelijke toegang tot alle onderdeel en van de trolley, zet je de trolley in de hoogste en laagste stand.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Matras
 - Kussen
 - Brancard
 - Zijhekken
 - Hoofd- en voeteneinde
 - Handmatige bediening
 - Rempedalen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je trolley te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital-producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de trolley na het desinfecteren af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

Lotus actieve opstahulp

59008100

De Lotus moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimonderdelen met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR-componenten gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propanol.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal.

Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische onderdelen van de PUR-componenten moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Lotus mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Reinig de Lotus met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de Lotus nog steeds correct werkt.
Jaarlijks 	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Reinig de Lotus met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Een zachte borstel kan worden gebruikt om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele Lotus van boven naar beneden af. Gebruik geen druipnatte doek. Voor gemakkelijke toegang tot alle delen van de Lotus, zet je de poten in zowel de brede als de smalle stand.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Onderdelen
 - Onderbeensteuningen
 - Frame (vooral waar de gebruiker vasthoudt)
 - Handgrepen
 - Voetplaat
 - Gespreide pedalen
 - Wielen



Je kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om je Lotus te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital-producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Veeg de Lotus na het ontsmetten af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het ontsmettingsmiddel te verwijderen.

Lotus / Lotus Compact / Lotus XL – actieve opstahulp

59008200, 59008250, 59008270

De Lotus / Lotus Compact / Lotus XL moet na elk gebruik worden gereinigd met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR-integraalschuimcomponenten met IMC-coating moeten worden schoongewreven en gedesinfecteerd. Gebruik geen schurende of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Indien nodig kunnen de PUR-componenten gedesinfecteerd worden met een oplossing van 70% ethanol of propaan.

De tijd dat de producten op de onderdelen moeten blijven zitten, heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de PUR-onderdelen. Als gevolg van de materiaaleigenschappen van PUR contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot schade of scheuren in het materiaal.

Tot slot willen we erop wijzen dat ook niet-kritische onderdelen van de PUR-componenten moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Controleer de wielen regelmatig op haren, stof en zeepresten en verwijder deze indien nodig. Onderhoud en reparaties aan de Lotus / Lotus Compact / Lotus XL mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na iedere gebruik	• Maak de Lotus / Lotus Compact / Lotus XL schoon met water en gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen
Wekelijks	• Controleer de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder ze indien nodig. • Controleer of de Lotus / Lotus Compact / Lotus XL nog correct werkt.
Jaarlijks 	• Volgens de verordening inzake medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 moet een stoel worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Dit proces wordt bij voorkeur uitgevoerd door Lopital of een andere geautoriseerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden via Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.

Schoonmaakprotocol

Schoonmaken

1. Maak de Lotus / Lotus Compact / Lotus XL schoon met een vochtige doek met warm water en een door de instelling goedgekeurd neutraal schoonmaakmiddel. Een zachte borstel kan worden gebruikt om vlekken en hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Veeg de hele Lotus / Lotus Compact / Lotus XL van boven naar beneden schoon. Gebruik geen druipnatte doek. Voor gemakkelijke toegang tot alle delen van de Lotus / Lotus Compact / Lotus XL, zet u de poten in zowel de brede als de smalle stand.
3. Besteed extra aandacht aan de volgende oppervlakken:
 - Onderdelen
 - Ondersteuning onderbenen
 - Frame (vooral waar de gebruiker vasthoudt)
 - Handgrepen
 - Voetplaat
 - Spreid het pedaalbeen
 - Wielen



U kunt ook een reinigingsunit/reinigingssysteem gebruiken om uw Lotus / Lotus Compact / Lotus XL te reinigen. De temperatuur in het systeem mag maximaal 55°C zijn.

Desinfecteren

4. Herhaal het reinigingsprotocol - Reiniging na het lezen van "Gebruikelijke reinigings-/desinfectiemiddelen toepassen op Lopital-producten" op pagina 4/5 van dit document. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het juiste gebruik van het desinfectiemiddel.
5. Nadat u de Lotus / Lotus Compact / Lotus XL hebt ontsmet, veegt u de Lotus / Lotus Compact / Lotus XL af met een vochtige doek en schoon water om eventuele resten van het ontsmettingsmiddel te verwijderen.



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Voor meer informatie bezoek onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.com

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten Klasse 1 (MDR (EU) 2017/745).

Copyright © 2025 Lopital. All rights reserved.



Green Deal



Scan voor
informatie