



Creating balance in healthcare



# Elexo XXL Douche-toiletstoel



5100 5300

# Elexo XXL Douche-toiletstoel



5100 5300

## Elexo XXL Douche-toiletstoel hoog / laag

Het verzorgen van obesitas-cliënten op traditionele douche-toiletstoelen is zwaar werk. Het verplegend personeel staat noodgedwongen in een onnatuurlijke houding en heeft te kampen met statische rugbelasting. Met de elektrische traploos in hoogte verstelbare Elexo XXL douche-toiletstoel biedt Lopital verlichting.

De elektrische traploos in hoogte verstelbaarheid zorgt ervoor dat de stoel in zijn hoogste stand een maximale kantelverstelling van 20 graden bereikt zodat er een optimale zitbalans voor de cliënt ontstaat. Ook de verzorging heeft in deze stand optimaal bereik.

De cliënt zal veel comfort ondervinden van de ergonomisch gevormde zitting, de verlengde volledig wegdraaibare armsteunen en de comfortabele kuitsteun.

- Maximale belasting 220 kg.
- Kantelverstelling van 0 tot 20 graden.
- Eenvoudig elektrisch hoog / laag verstelbaar middels handbediening voorzien van accu-indicatie.
- 3 kunststof dubbel geremde zwenkwielen.
- 1 richtingswiel.
- Door het toepassen van 2 hefmotoren zeer stabiel.
- Geleider voor toilettemmer of ondersteek.
- Voorzien van slaapstandfunctie na 60 minuten.
- Eenvoudig oplaadbaar met meegeleverde lader.
- Verlengde volledig wegdraaibare armsteunen.
- Tweedelige zitting met opening aan voor- en achterzijde.
- Ergonomisch kuitsteun.
- Wegdraaibare en afneembare voetsteunen.

### Opties

- Art.nr. 6950 1104 Kunststof ondersteek met deksel.
- Art.nr. 6950 1120 Veiligheidsgordel.
- Art.nr. 6975 8045 Vierpunts veiligheidsgordel.






Geschikt voor mensen met een matige tot ernstige beperking



*Ergonomisch gevormde zitting voor toiletgebruik.*



*Geleider voor RVS toiletemmer of ondersteek.*

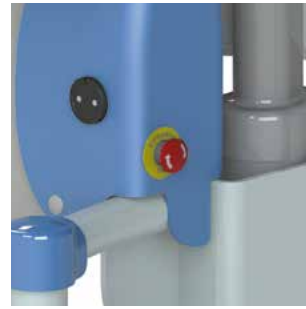


*Noodstop.*



*Onafhankelijk wegdraibare armsteunen.*



*Wegdraibare en afneembare voetsteunen.*

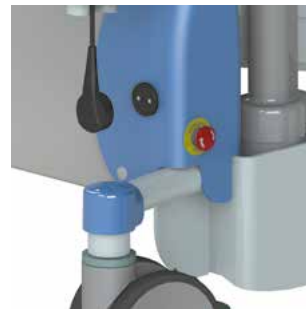

*Oplaadpunt met magneetkoppeling.*







*Elexo XXL laagste stand.*



*Elexo XXL hoogste stand met 20 graden kantelverstelling.*

## Technische details

- |                             |                 |                          |                       |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| • Max. belasting            | 220 kg          | • Draaicirkel            | 135 cm                |
| • Eigen gewicht             | 71 kg           | • Elektrische aansturing | 24V                   |
| • Zitbreedte                | 70 cm           | • Accucapaciteit         | 2 x 12V, 7.2Ah        |
| • Zitdiepte                 | 54 cm           | • Lader                  | 220V 50 / 60Hz 500mA  |
| • Zithoogte (verstelbaar)   | 50 tot 105 cm   | • Veiligheid             | Magnetische koppeling |
| • Totale lengte basisframe  | 114 cm          | - Aan / uit schakelaar   |                       |
| • Totale breedte basisframe | 89 cm           | - Noodstop               |                       |
| • Kantelverstelling         | 0 tot 20 graden | - Nooddaalknop           |                       |
|                             |                 | • Waterdichtheid         | IPX4                  |

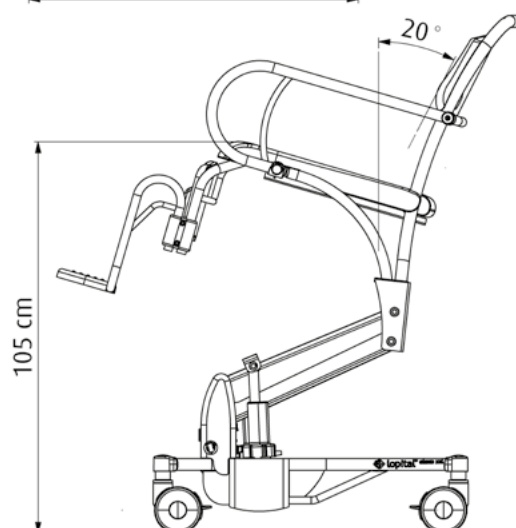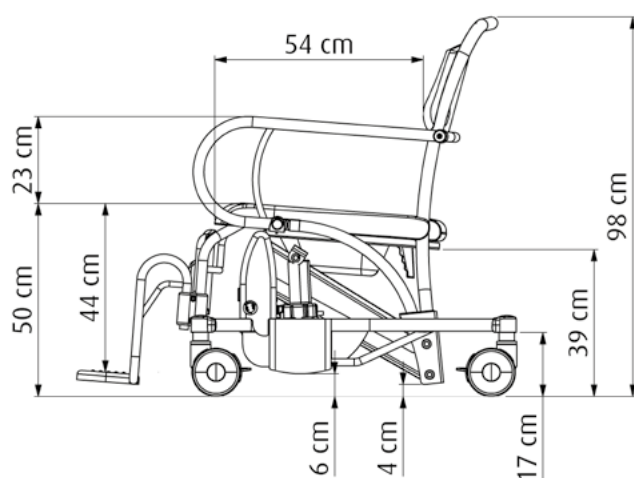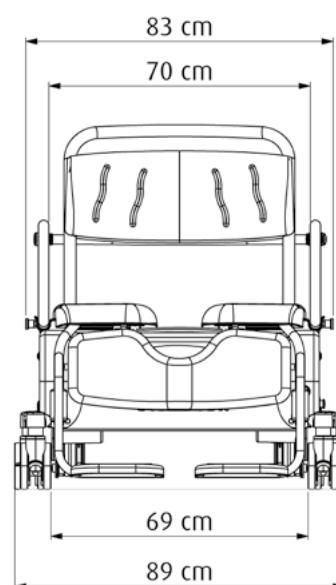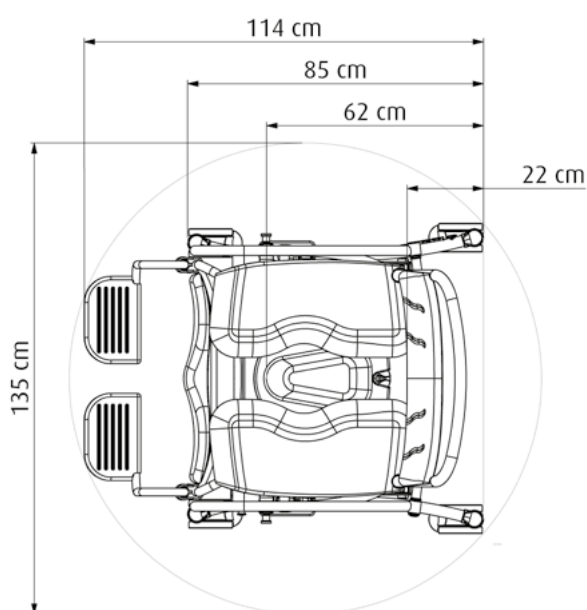

Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar  
 Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be), [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

