

Lotus

Ondersteunt mobiliteit, stimuleert zelfstandigheid

5900 8200 / 8250 / 8270

Lotus actieve opstahulp

De Lotus is ontworpen voor personen die nog zelfstandig kunnen staan en over voldoende rompstabiliteit beschikken, maar moeite hebben met lopen of niet meer kunnen lopen. Nadat de cliënt op de Lotus actieve opstahulp heeft plaatsgenomen, kan de zorgverlener de cliënt veilig en efficiënt verplaatsen.

De Lotus is bedoeld voor korte transfers, zoals van het bed naar het toilet. Doordat de cliënt een actieve zithouding aanneemt, kost het minder inspanning om weer tot staan te komen. Dit zorgt voor optimaal comfort voor zowel de cliënt als de zorgverlener.

De Lotus is voorzien van draaibare zittingdelen met een snaplock-sluiting, comfortabele onderbeensteunen en een spreidfunctie van het onderstel. Dankzij deze spreidfunctie kan de Lotus dichtbij de cliënt worden geplaatst, zodat deze actief kan plaatsnemen. De Lotus stimuleert de cliënt om actief deel te nemen aan transfers, wat bijdraagt aan spiertraining en het bevorderen van zelfstandigheid.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



Technische specificaties


Max. belasting	200 – 227 kg
Productgewicht	32 kg
Garantie	5 jaar



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit


5900 8200

Lotus actieve opstahulp

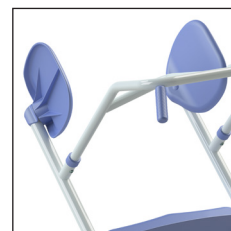

Draaibare zitdelen met snaplock-sluiting.

Art.nr.	Art. omschrijving	Materiaal	Maximale belasting	Lengte x breedte x hoogte	Breedte poten	Mechanische pootspreiding	Gewicht	Lengte cliënt
5900 8200	Lotus actieve opstahulp	staal	200 kg	96 cm x 66 cm x 110 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32 kg	170 cm – 195 cm
5900 8250	Lotus Compact actieve opstahulp	staal	200 kg	96 cm x 66 cm x 101 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32 kg	135 cm – 170 cm
5900 8270	Lotus XL actieve opstahulp	staal	227 kg	102 cm x 74 cm x 110 cm	74 cm	57 cm – 94 cm	32 kg	170 cm – 195 cm

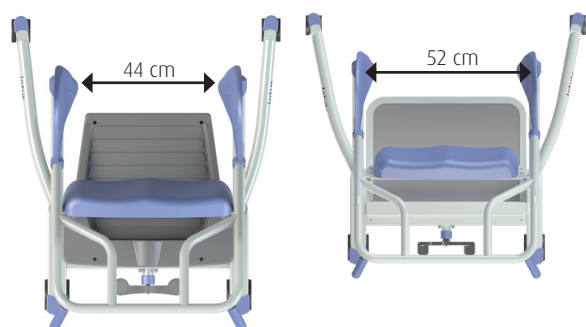

Lotus en Lotus Compact

Lotus XL



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
 Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

