

Flexo

Vertrouwd comfort, ontworpen voor dagelijkse zorg

5100 5199

Flexo douche-toiletstoel

De Flexo is een compacte en veelzijdige douche-toiletstoel die optimale ondersteuning biedt bij dagelijkse zorgmomenten, met hydraulische hoogteverstelling voor een juiste positionering van de cliënt en ergonomisch werken voor de zorgverlener.

De stoel is in hoogte verstelbaar, wat zorgt voor een gezonde werkhouding en minder fysieke belasting voor de zorgprofessional. De opklapbare armsteunen en voetsteunen maken transfers eenvoudiger en veiliger, terwijl de handgrepen en wendbare zwenkwielen zorgen voor soepele manoeuvreerbaarheid – zelfs in kleinere ruimtes.

Duurzame, corrosiebestendige materialen en gladde oppervlakken maken de Flexo eenvoudig te reinigen en bestand tegen intensief gebruik. Het moderne, functionele ontwerp past in elke professionele zorgomgeving.

Betrouwbaar, stijlvol en doordacht – de Flexo is ontworpen voor de zorgpraktijk van vandaag en morgen.

Hydraulische Hoogte- & Kantelverstelling. De soepele hydraulische hoogteverstelling en kanteling van 0° tot 20° maken ergonomische werkposities en een veilige, comfortabele positionering van de gebruiker mogelijk.

Eenvoudige & Veilige Transfers. Opklapbare, vergrendelbare armleuningen en wegzwenkbare voetsteunen met kuitondersteuning maken transfers eenvoudiger, terwijl de stabiliteit behouden blijft.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.



Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

Technische specificaties

Max. belasting	150 kg
Productgewicht	38 kg
Zitbreedte	47 cm
Zitdiepte	44 cm
Zithoogte (verstelbaar)	50 tot 105 cm



Geschikt voor mensen met een zeer lichte tot ernstig verminderde mobiliteit.

Ergonomische handgreep voor soepele en lichte bediening

Armsteunen met voorsluiting voor extra veiligheid en zekerheid

Hoog- / laagbediening met voetpomp.

Ergonomische zitting

Universele geleider voor po/ondersteek

Sterk en stabiel frame voor maximale veiligheid en ondersteuning

Voetsteun met kuitband


Bumper ter bescherming van het frame

Optioneel

6960 8026
Comfort beensteun set afneembaar.



6840 5661
Voorsluiting set met extra vergrendeling.

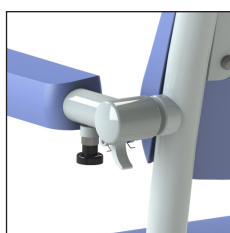

6840 5500
Hoofdsteun verstelb.



Opties

- 7056 5001 Armlegger recht
- 6840 5661 Voorsluiting set met extra vergrendeling blauw compleet
- 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- 6975 8044 Veiligheidsgordel 2-punts kunststof clip
- 6975 8045 Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting
- 6950 5624 Platilon rugleuning
- 6950 5625 Platilon zitting U-model
- 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar
- 7500 5693 Verhogingsbus 30mm
- 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling

Technische specificaties

Totale lengte van het onderstel	104 cm
Totale breedte van het onderstel	73 cm
Draaicirkel	118 cm
Kantelverstelling	0 tot 20 graden



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information