

Nemo

Veilig en stabiel kantelcomfort voor elke zorgsituatie

5100 5100

Nemo douche-toiletstoel

De Nemo is een verrijdbare en kantelbare douche- en toiletstoel, speciaal ontworpen voor cliënten die extra ondersteuning nodig hebben tijdens de dagelijkse zorg. De handmatig kantelbare stoel maakt het mogelijk om cliënten in een comfortabele en stabiele positie te plaatsen, terwijl zorgverleners in een ergonomisch verantwoorde houding kunnen blijven werken. Dit zorgt voor fysieke ontlasting en verhoogt de veiligheid voor beide.

De stoel is geschikt voor gebruik onder de douche en als toiletstoel en kan eenvoudig over het toilet worden geplaatst. Dankzij het compacte formaat en eenvoudig bedienbare beremde wielen is de Nemo zeer wendbaar en veilig in gebruik, zelfs in kleinere ruimtes. De stevige, onderhoudsvriendelijke constructie is ontworpen voor intensief dagelijks gebruik.

De Nemo is een betrouwbaar hulpmiddel dat bijdraagt aan hoogwaardige dagelijkse zorg, met aandacht voor comfort en gebruiksgemak.

Handmatig kantelbaar tot 30 graden met behulp van een gasveer voor optimale positionering en ergonomische zorg.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

Opties

- 6840 5660 Voorsluiting set blauw compleet
- 6840 5661 Voorsluiting set met extra vergrendeling blauw compleet
- 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- 6975 8044 Veiligheidsgordel 2-punts kunststof clip
- 6975 8045 Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting
- 6950 5624 Plaiton rugleuning
- 6950 5625 Plaiton zitting U-model
- 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar
- 7500 5693 Verhogingsbus 30mm
- 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling



Technische specificaties

Max. belasting	150 kg
Productgewicht	24 kg
Zitbreedte	47 cm
Zitdiepte	44 cm
Zithoogte	54 cm
Totale lengte van het onderstel	73 cm




Geschikt voor mensen met een zeer licht tot een ernstig verminderde mobiliteit

Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

In hoogte en diepte
verstelbare hoofd-/
nekondersteuning

Ergonomische
zitting

Gasveer
voor soepele
kantelverstelling

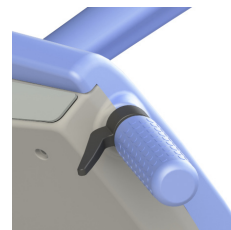

Gasveerhendel voor
kantelverstelling.

Universele geleider voor
po/ondersteek

Bumper ter bescherming
van het frame

Optioneel


6960 8026
Comfort beensteun
set afneembaar.



6950 1104
Po steek met deksel
kunststof.



6840 5500
Hoofdsteun
verstelbaar.

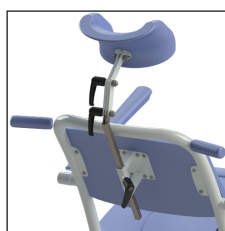

6840 5660
Voorsluiting set blauw
compleet.



Technische specificaties

Totale breedte van het onderstel	66 cm
Diepte-/hoogteverstelling van hoofd-/nekondersteuning	7 cm / 12 cm
Draaicirkel	112 cm
Kantelverstelling	0 tot 30 graden



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

LFT5100-2026-01 NL



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten van Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.