

Reflex XXL

Zorg versterken, zonder grenzen

5100 5900

Reflex XXL douche-toiletstoel

De Reflex XXL is ontwikkeld voor bariatrische zorg en combineert hoge belastbaarheid met ergonomisch comfort, stabiliteit en veilige ondersteuning tijdens dagelijkse transfers. De in hoogte verstelbare rugleuning en in breedte verstelbare armsteunen zorgen voor een comfortabele en gepersonaliseerde zithouding voor uiteenlopende lichaamsvormen en zorgbehoeften. Dankzij de veilig vergrendelbare armsteunen met drukknopontgrendeling verlopen transfers soepel, gecontroleerd en veilig voor zowel cliënt als zorgverlener. Met het robuuste frame, de sterke stabiliteit en de krachtige elektrische bediening biedt de Reflex XXL optimaal comfort, veiligheid en vertrouwen voor bariatrische cliënten.

Ontwikkeld voor intensief gebruik in veeleisende zorgomgevingen ondersteunt de Reflex XXL ergonomisch en efficiënt werken tijdens dagelijkse zorgmomenten. De soepele hoogte- en kantelverstelling zorgen voor nauwkeurige positionering, inclusief een voorwaartse negatieve kanteling die extra ondersteuning biedt bij het opstaan. Dankzij het ruime ontwerp, de stabiele constructie en de krachtige elektrische functies sluit de Reflex XXL naadloos aan bij veilige en comfortabele zorg voor zowel cliënt als zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.


Sta-op & Kantelfunctie. Dankzij de negatieve zitkanteling biedt de Reflex XXL een effectieve sta-op functie. Dit vergroot de zelfstandigheid van de gebruiker en vermindert tegelijkertijd de fysieke belasting voor de zorgverlener.

Adaptieve Ondersteuning. De in hoogte verstelbare rugleuning en in breedte verstelbare armleuningen bieden optimale ondersteuning voor een breed scala aan lichaamsprofielen. De armleuningen vergrendelen veilig in positie en kunnen met één druk op de knop worden ontgrendeld, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde transfers.



Technische specificaties

Max. belasting	275 kg
Productgewicht	70 kg
Zitbreedte (verstelbaar)	70 – 80 cm
Zitdiepte	53 cm
Zithoogte (verstelbaar)	45 – 76 cm

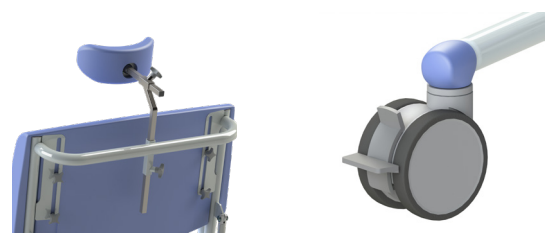

Hoofdsteun verstelbaar.

3 zwenkwielen en 1 richtingswiel met individuele remmen.



Geschikt voor mensen met een matig verminderde tot een ernstig verminderde mobiliteit

5100 5900

Reflex XXL douche-toiletstoel

Optioneel

6950 1104 Po steek met deksel kunststof.

In hoogte verstelbare rugleuning voor gepersonaliseerd comfort en stabiliteit

In hoogte verstelbare voetsteun en 30° naar buiten draaibaar

Sterk en stabiel frame voor maximale veiligheid en ondersteuning

3 zwenkwielen en 1 richtingswiel met individuele remmen

Opklapbare armsteunen met drukknopbediening en breedteverstelling.

Ergonomisch zitcomfort met afneembare zitdelen met snaplock-systeem voor eenvoudige reiniging.

Het zijdisplay toont **duidelijke status- en foutcodes** voor snelle diagnose, zoals actuator- of kabelstoringen, laag batterijniveau en noodverlaging. LED-indicatoren signaleren stroomonderbrekingen en noodstopactivatie voor een veilige en betrouwbare werking.



Technische specificaties

Totale lengte van het onderstel	121 cm
Totale breedte van het onderstel	84 cm
Draaicirkel	140 cm
Kantelverstelling	0 tot 30 graden achterover, 10 graden voorover
Elektrische voeding	24V
Batterijcapaciteit	7Ah
Oplader (Mascot 3743)	110-240V AC, 50-60Hz, max. 0.35A, kabellengte 1.5 m
Diepte-/hoogteverstelling van hoofd-/nekondersteuning	7 cm / 12 cm
Hoogteverstelling van de voetsteun	8 cm



Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
 Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Scan for information

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten van Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.